

Prophy-Mate neo

プロフィールメイトneo
歯面清掃用ハンドピース

恋スル白イ歯を創る、プロフィールメイト ネオ

“フラッシュパール”との組合せで高い効果を発揮する、
歯肉縁上用のパウダーポリッシング。
ナカニシ独自のツインノズルにより、
パワフルなパウダー噴射を実現しました。
アクセス性に優れた口腔内で操作しやすい
スリムなハンドピース。
歯と歯の間など、細かい部分も
効率的でスピーディーなクリーニングが可能に。
人間工学に基づいて作られたグリップ感の高いフォルムが、
しなやかな操作を実現します。



ツインノズルでパワフルな噴射力を持続

ナカニシ独自のツインノズルにより、パワフルかつ
なめらかなパウダーロスの少ない安定した噴射を
実現。高い噴射持続力とポリッシング能力で、チェア
タイムを短縮しながら効率的な成果が得られます。



操作性に優れたノズルチップ

長く小さいノズルチップは、患者・術者の負担を軽減。頬側では必要
以上にハンドピースで口唇を広げることなく、舌側では広い術野の確保
が可能です。また、ノズルの角度は臼歯部に適した60°と前歯部に適した
80°があり、施術箇所に応じて使い分けすることで、よりスムーズな操作が
可能になります。



指先で簡単に回せるハンドピース

スリムで、しかもくるくる回せるハンドピースは、使用角度の調整が行い
やすく、無理な挿入角度や姿勢をとらなくても施術が行えます。



ワンタッチ着脱

カップリングへの接続、ハンドピース接続のいずれもワンタッチで簡単に
着脱できます。



モデル ラインナップ

さまざまなメーカーのユニットに接続するためのカップリングタイプをご用意しています。

	NSK	KaVo®	Sirona®	W&H®	Bien-Air®	M4	モリタ	ヨシダ	オサダ
製品名	PMNG-PTL-P	PMNG-KV-P	PMNG-SR-P	PMNG-WH-P	PMNG-BA-P	PMNG-M4-P	PMNG-MR-P	PMNG-YS-P	PMNG-FJ-P
製品番号	Y135029	Y135030	Y135031	Y135032	Y135033	Y135034	Y1001297	Y1001968	Y1001954
標準価格	¥147,000	¥147,000	¥147,000	¥147,000	¥147,000	¥136,000	¥147,000	¥147,000	¥147,000
接続可能 カップリング	NSK バテラス カップリング	KaVo® カップリング	Sirona® カップリング	W&H® Roto Quick (モリタ カスタムエア もご利用いただけます)	Bien-Air® Unifix®	ミッドウェスト 4ホールに 接続可能	モリタ αメインチューブ	ヨシダ クイックジョイント (3ホールの4ジョイント もご利用いただけます)	オサダ ファイジョイント

セット内容
 ・プロフィールメイトneo ハンドピース(ノズル60°、ノズル80°付) ・パウダーケース ・パウダーケースカバー 予備1個
 ・フラッシュパール(15g入) × 5袋 ・プロアノズル ・リングレンチ ・他付属品

※使用中はライトが点きません(ライト付カップリング使用の場合)

販売名:プロフィールメイト neo 一般的名称:電動型機器接続歯面清掃用器具
 認証番号:223ALBZX00029000 管理医療機器

ハンドピースは全て
熱水洗浄可能 135°C
135°Cまでの温度でオートクレープ可能

FLASH pearl

フラッシュパール
歯面清掃用パウダー


快適で効果的なクリーニング体験を

しょっぱくない/マイルドな味で刺激が少なく、患者さんに優しい歯面清掃用パウダーです。高いクリーニング力となめらかな仕上がりの秘密は、カルシウムベースの球体粒子。平均54 μmの細かいパウダーが歯面を転がるように動くので、歯面へのダメージを抑え、スピーディーにバイオフィームやステインを落とします。短時間で効果的な施術が可能な“フラッシュパール”は、患者さんが定期的に歯面清掃を行うモチベーションアップにもつながります。



球体粒子で歯面にやさしい

球体状の細かい粒子で構成されているパウダーが歯面上を転がるように動くことで、ステインやバイオフィームなどをやさしくスピーディーに取り除きます。

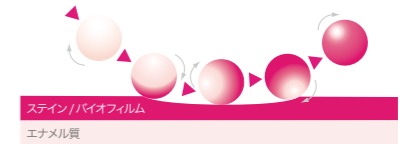


電子顕微鏡によるパウダーポリッシング後の歯面の状況

細かいところまで早く、キレイに

ノズルを歯面に対して平行(10°~60°)に近い角度に保ち、パウダーを歯面に転がすイメージで細かく動かしながら使用します。噴射角度の幅が広く、噴射する向きに制約が少ないためスムーズな作業を実現し、作業効率アップに貢献します。

*歯肉辺縁・歯肉線下への直接噴射は行わないでください。

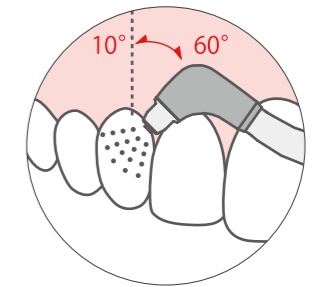

塩分ゼロ、患者さんにやさしい成分

成分の94%が炭酸カルシウムなので、しょっぱさを感じず患者さんに不快感を与えません。ナトリウムフリーにより、塩分摂取制限のある患者さんにも使用できます。

スピーディーで高いクリーニング効果

球体粒子であるフラッシュパールのスピーディーで高いクリーニング効果を発揮するには、歯面を転がすようにポリッシングすることが大切です。ハンドピースがくるくる回せ、パウダーを転がすように噴射するプロフィールメイト ネオの使用が最適です。



粉詰まりも軽減

粒子がとても細かく、水に溶けにくいので粉詰まりが軽減できます。また、器具内でのパウダー目詰まりも少なくメンテナンスも簡単です。



製品名…フラッシュパール
(100袋入)

製品番号…Y900693

標準価格…¥22,700

• 15 g × 100袋



製品名…フラッシュパール
(ボトル4本入)

製品番号…Y900698

標準価格…¥18,000

• 300 g × 4本

販売名:フラッシュパール 一般的名称:歯面研磨材 届出番号09B2X00016000034 一般医療機器

Perio-Mate

ペリオメイト
歯面清掃用ハンドピース

美しく健康な歯のための、パウダーメンテナンス

スクレーパーなどの接触機器ではチップが届かず付着物を除去できなかった箇所も、非接触での清掃を可能にするペリオメイトのパウダーメンテナンス。広範囲のパウダー噴射でバイオフィルムの清掃漏れをできる限りなくし、チェアタイムを短縮しながら、通常より効率的に成果を得られます。術者にとっても、患者さんにとっても快適な、パウダーメンテナンス体験がここから始まります。



効率的で、歯にも優しいプロケア。
パウダーメンテナンスを既存設備のまま手軽に導入できます。

- 使用中のチェアユニットにワンタッチで接続が可能なハンディータイプ。
- 安全性と操作性を追求したノズルチップ。
- 粉詰まりのリスクが少ない、パウダー経路が短くシンプルな構造。
- スピーディーで効果的なバイオフィルム除去。


パウダー流量調整が可能

口腔内の状況に応じてパウダー流量の調整が手元で簡単に行えます。調整リングを指先で回すだけでパウダー流量を調整できるため、施術を中断することなくコントロールすることが可能。リングを絞ることによりパウダーを止めることができ、患部の洗浄も行えます。




360°回せるハンドピースとノズルチップ

ハンドピースとノズルチップは指先で容易に回すことが可能。隣在歯や豊隆部などの影響を受けにくく、ノズルチップを歯面に沿わせることができます。ノズルチップを回すことで、常に効果的な噴射位置を保つことができ、無理な使用角度での挿入・操作が減少します。

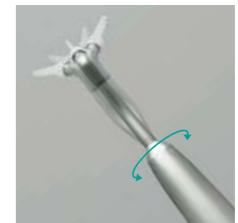

狭い口腔内でも操作が容易なスリムノズル

スリムノズルは狭い口腔内でも広い作業域と、高い視認性を実現。細長いノズル形状は、頬粘膜や口唇の干渉を受けにくくなっています。アクセスが困難な部位へのアプローチもスムーズに行え、ノズルチップの挿入向きを妨げません。また、臼歯部の歯間などハンドピースの挿入が難しい部位でも広い視野を確保することができます。

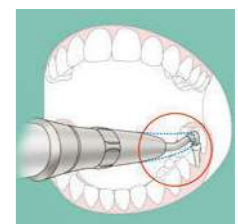

メンテナンス

ご自身の手でノズル・ハンドピース・パウダーケースをそれぞれ簡単に分解可能。定期メンテナンスに出す時間のロスもなく、粉詰まりへの対応も容易です。また、使用後のメンテナンスも専用のプロアーノズルを使用することで、簡単に内部に残ったパウダー・水を噴出することができます。ハンドピースを含め（ノズルチップ以外）すべてのパーツが、繰り返し超音波洗浄※・オートクレーブ滅菌が可能です。
※ハンドピースは全て熱水洗浄可能



モデル ラインナップ

さまざまなメーカーのユニットに接続するためのカップリングタイプをご用意しています。

	NSK	KaVo®	Sirona®	W&H®	M4	モリタ	ヨシダ	オサダ
製品名	PER-PTL-P	PER-KV-P	PER-SR-P	PER-WH-P	PER-M4-P	PER-MR-P	PER-YS-P	PER-FJ-P
製品番号	Y1003009	Y1003010	Y1003011	Y1003012	Y1003013	Y1002661	Y1002663	Y1002664
標準価格	¥167,000	¥167,000	¥167,000	¥167,000	¥156,000	¥167,000	¥167,000	¥167,000
接続可能 カップリング	 NSK バテラス カップリング	 KaVo® カップリング	 Sirona® カップリング	 W&H® Roto Quick (モリタ カスタムエアア もご使用いただけます)	 ミッドウェスト 4ホールに 接続可能	 モリタ αメインチューブ	 ヨシダ クイックジョイント (ライトヨシダジョイント のみご使用いただけます)	 オサダ ファインジョイント

セット内容
● ペリオメイトハンドピース ● パウダーケース ● パウダーケースカバー 予備 ● ペリオメイトパウダー (160 g x 1本) ● ペリオメイトノズルチップ (40本)
● ペリオメイトノズルチップリムーバー ● リングレンチ ● プロアーノズル ● 他付属品

販売名:ペリオメイト 一般的名称:電動型機器接続歯面清掃用器具
認証番号:226ABBZX00023000 管理医療機器


 ハンドピースは全て熱水洗浄可能  135°C 135°Cまでの温度でオートクレーブ可能

POWDER MAINTENANCE


パウダーメンテナンスの使い分け

	歯面清掃用器具	対象	部位	使用ポイント	使用パウダー
PROPHY	 Prophy-Mate neo	天然歯	 縁上	 	 FLASH pearl
	 Varios Combi Pro	天然歯	 縁上 (歯肉辺縁)	  	 Perio-Mate Powder
PERIO	 Perio-Mate	補綴歯	 縁下 (歯周ポケット)	 	 Perio-Mate Powder

パウダー粒子比較

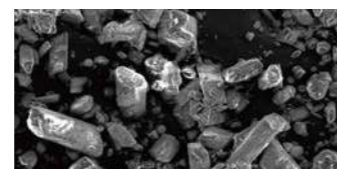

従来のパウダー(重炭酸ナトリウム)
平均粒子径 **73μm** SEM画像(x150)

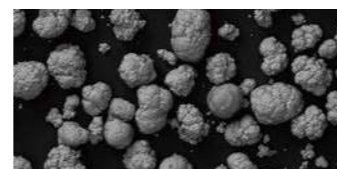

FLASH pearl(炭酸カルシウム)
平均粒子径 **54μm** SEM画像(x150)



Perio-Mateパウダー(グリシン)
平均粒子径 **25μm** SEM画像(x150)

